



(pilot area)

**PILOTE A2**



- > простота
- > легкость использования
- > надежность
- > контроль

# PILOT A2 Простота на каждый день

Разработан для ежедневного использования, максимально простое управление параметрами инфузии

## 1. простота

- Понятный контроль
- Простое начало инфузии
- Четко выраженные сигналы тревог
- Цветной дисплей

## 2. легкость использования

- Гибкость установок
- Эргономичный дизайн
- Разработан для легкой обработки и проведения сервиса

## 3. надежность

- Гарантированная продолжительность инфузии
- Четкая визуализация основной информации

## 4. контроль

- Точность и постоянство скорости инфузии


Выбор шприцев	12 типов шприцев 50/60 и 20 мл, автоматическое распознавание объема шприца.
Надежная установка шприца	Фиксатор кромки шприца, детектор поршня и кромки шприца, система защиты от свободного тока жидкости.
Скорость инфузии	0.1 - 400 мл/час, 0.1 мл шаг с точностью $\pm 1\%$ .
Болюс	Скорость программируется до 500 мл/час с отображением введенного объема.
Контроль давления	Предел тревоги окклюзии: 3 выбираемых предела с системой анти-болюс при устранении окклюзии.
История событий	Коммуникация с компьютером через RS-232 для получения данных (опция).
Соответствие стандартам	Сертификат CE 0459 стандарта EEC 93/42 директиве EN60 601-1 и EN 60 601-2-24 с IP 34 защита от брызг.
Батарея и транспортировка	Автономная работа 7 часов минимум при скорости 5 мл/час, быстрая подзарядка (2.5 часа для 6 часов автономной работы) заряд батареи отражается в часах и минутах для выбранной скорости, внешнее питание 12-15В постоянного тока 15Вт.



Простая и надежная установка шприца



Точность скорости инфузии

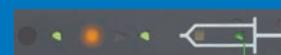

Четко выраженные сигналы тревог



Ясный контроль



Заявленные характеристики и описание могут быть изменены в соответствии с изменяющимися стандартами. Пожалуйста, обратитесь к нам для уточнений

**FRESENIUS KABI**  
caring for life

Производитель  
Fresenius Vial S.A.S  
Le Grand Chemin  
38590 Brézins  
France  
Тел: +33 (0)4 76 67 10 10  
Факс: +33 (0)4 76 67 11 34  
www.fresenius-kabi.com

Компания Fresenius Kabi


**DELUS**  
PROGRESS IN THE NAME OF LIFE

Екатеринбург  
ул. Посадская, 23  
Тел.: (343) 310-30-00, 310-37-70  
+7 963 038 31 99  
E-mail: poi@delrus.ru  
Москва,  
ул. Ивана Франко, 4  
Тел.: (495) 380-00-80  
Факс: (495) 780-31-11  
E-mail: moscow@delrus.ru



(pilot area)

PILOT C

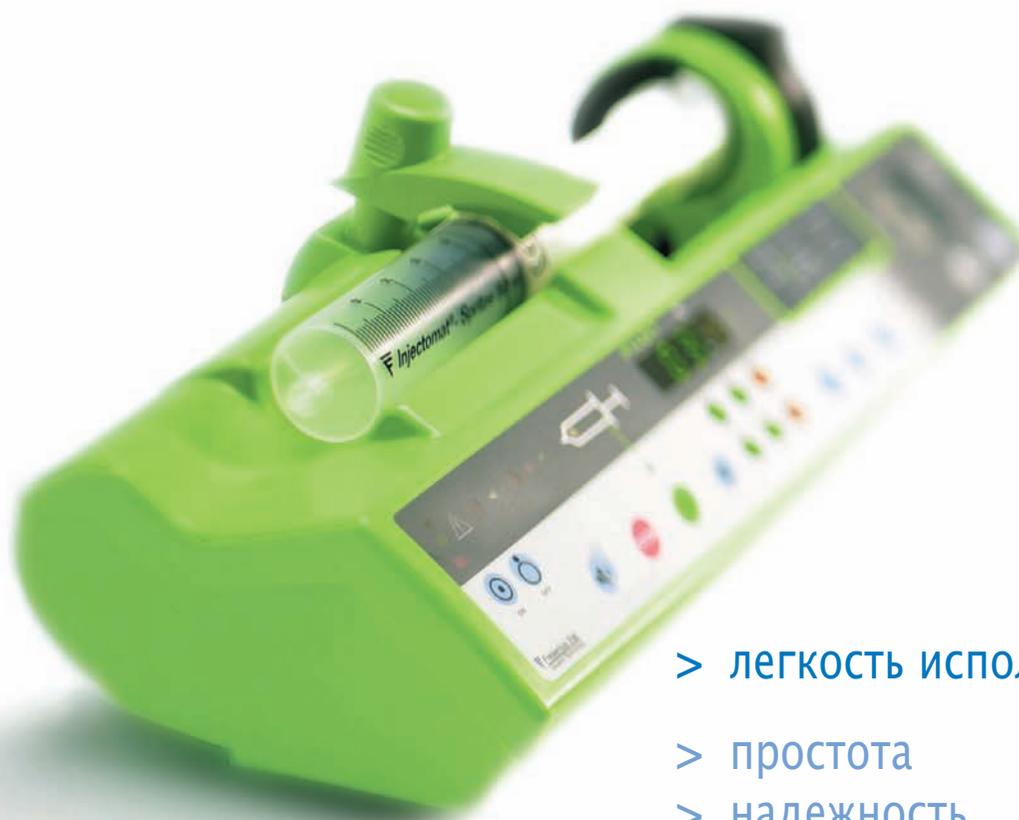

- > ЛЕГКОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- > простота
- > надежность
- > контроль



**FRESENIUS  
KABI**

caring for life

**PILOT C**

## Уверенность в высокой безопасности

Динамическое отражение любых изменений давления в инфузионной линии делает выше безопасность инфузии в сфере интенсивной терапии и реанимации

### 1. легкость использования

- Гибкость установок
- Точный аналоговый дисплей давления
- Различные варианты установки тревог окклюзии
- Активная система анти-болюса после устранения окклюзии

### 2. простота

- Ясный контроль
- Простая процедура начала инфузии
- Четко выраженные сигналы тревог

### 3. надежность

- Уверенность в постоянстве инфузии
- Ясно видимая информация о процессе инфузии

### 4. контроль

- Надежность и точность инфузии

Выбор шприцев	12 типов шприцев 50/60 и 20 мл, автоматическое распознавание объема шприца.
Надежная установка шприца	Фиксатор кромки шприца, детектор поршня и кромки шприца, система защиты от свободного тока жидкости.
Скорость инфузии	0.1 - 800 мл/час, 0.1 мл шаг с точностью ± 1%.
Болюс	Программируемый со скоростью до 800 мл/час, с отображением введенного объема.
Контроль давления	Предел давления окклюзии: устанавливается до 900 мм Hg, (DPS) Динамическая Система Давления, система анти-болюс – уменьшает размер болюса до 0.2 мл при устранении окклюзии, возможность установки тревоги падения давления/отсоединения линии пациента.
История событий	Коммуникация с компьютером через RS-232 для получения данных.
Соответствие стандартам	Сертификат CE 0459 стандарта EEC 93/42 директиве EN60 601-1 и EN 60 601-2-24 с IP 34 защита от брызг.
Батарея и транспортировка	Автономная работа 7 часов минимум при скорости 5 мл/час, быстрая подзарядка (2.5 часа для 6 часов автономной работы) заряд батареи отражается в часах и минутах для выбранной скорости, внешнее питание 12-15В постоянного тока 15Вт.
Возможности	Совместимость с Master PCA (модуль самоанальгезии).



Динамический контроль давления



Точность скорости инфузии



Четко выраженные сигналы тревог



Ясный контроль



Заявленные характеристики и описание могут быть изменены в соответствии с изменяющимися стандартами. Пожалуйста, обратитесь к нам для уточнений

**FRESENIUS KABI**  
caring for life

Производитель  
Fresenius Vial S.A.S  
Le Grand Chemin  
38590 Brézins  
France  
Тел: +33 (0)4 76 67 10 10  
Факс: +33 (0)4 76 67 11 34  
www.fresenius-kabi.com

Компания Fresenius Kabi

**DELUS**  
PROGRESS IN THE NAME OF LIFE

Екатеринбург  
ул. Посадская, 23  
Тел.: (343) 310-30-00, 310-37-70  
+7 963 038 31 99  
E-mail: poi@delrus.ru  
Москва,  
ул. Ивана Франко, 4  
Тел.: (495) 380-00-80  
Факс: (495) 780-31-11  
E-mail: moscow@delrus.ru